

Biotage® Alstra™ Remote


Speed Up Your Peptide Synthesis Workflow



Initiator + Alstra™の生産性が向上!!

この製品により、ユーザーはペプチド合成セットアップをオフラインでプログラムし、Initiator+ Alstra™ でファイルをインポートし簡単にペプチド合成を実行することができます。


これまで以上に合成セットアップが早くなります

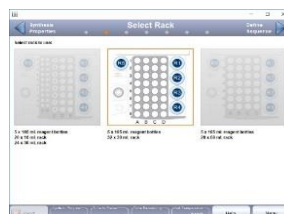


Alstra™ Remoteソフトウェアは、合成に先立って準備する必要がある試薬の計算を含め、ユーザー自身のコンピュータで完全な合成セットアップをオフラインでプログラム作成編集機能が使用できます。さらに、合成セットアップファイルをインポートし、Biotage® Initiator+ Alstra™ マイクロウェーブペプチド合成装置で実行することができます。これにより、生産性が向上し、連続合成中に次の合成準備が行え、合成完了から合成開始までの時間を最小限に抑えられます。

生産性比較イメージ

従来のワークフロー

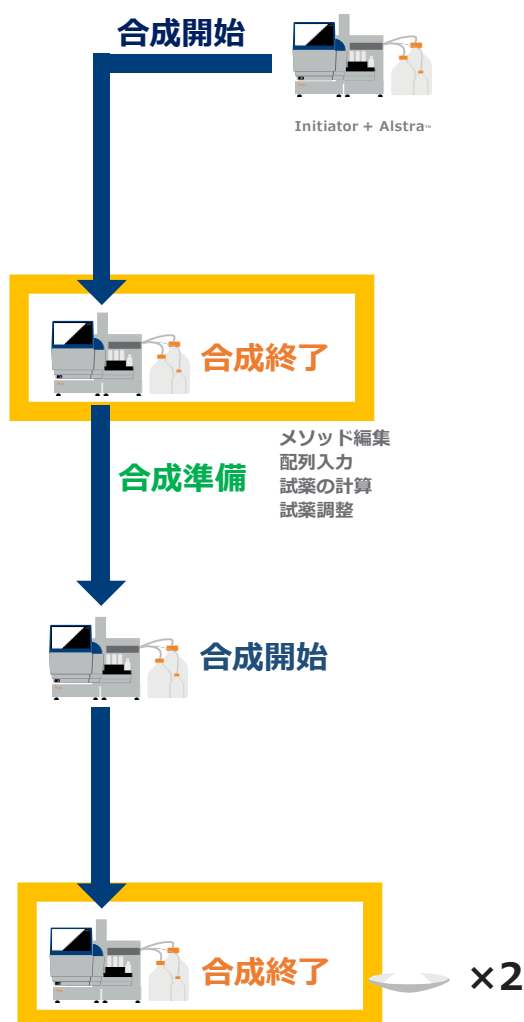

Newワークフロー

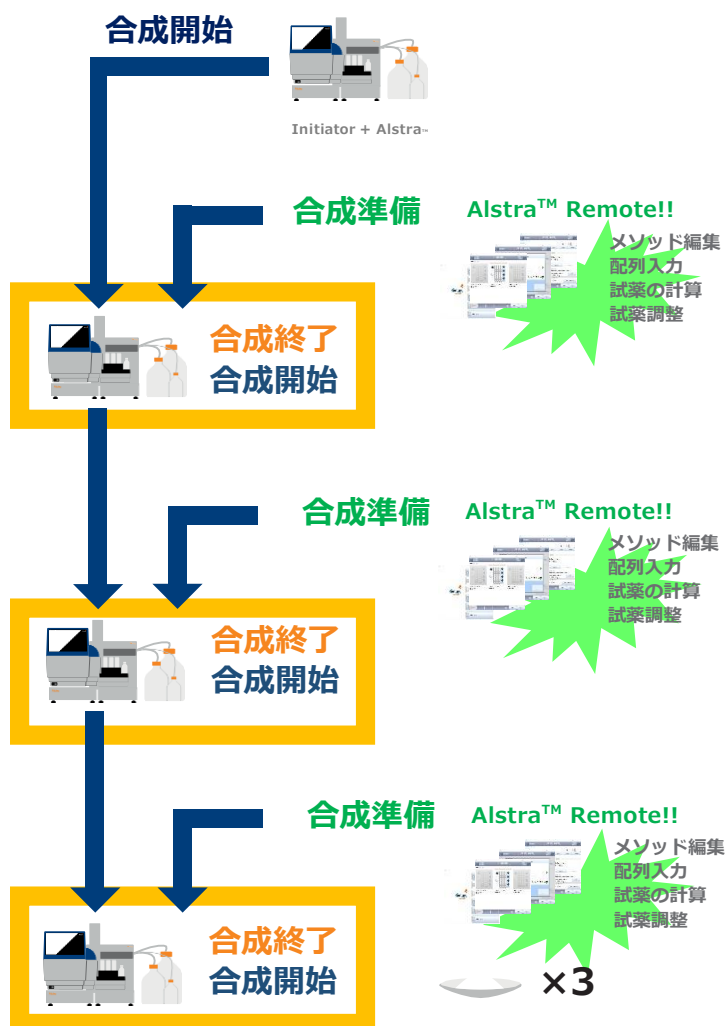

互換性

Laptop or desktop PC with Windows 10 OS

Biotage® Initiator+ Alstra microwave peptide synthesizer requires latest Initiator+ Alstra software (currently version 1.2.5)

【価格情報】

製品番号	製品
416408	Biotage® Alstra™ Remote Software (1 license)

表示価格は消費税別価格です。

現在、ご使用中の装置へcurrently version 1.2.5へアップグレードご希望の際は弊社へお問い合わせください。

バイオタージ・ジャパン株式会社

[本社]
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4, 6F Tel: 03- 5627 - 3123 Fax: 03- 5627- 3121

[西日本営業所]
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28, 4F Tel: 06- 6397 - 8180 Fax: 06- 6397- 8170

URL: <https://www.biotage.co.jp/> E-mail: Japan_info@biotage.com

Part Number: Alstra Remote 202004

© 2020 Biotage. All rights reserved. No material may be reproduced or published without the written permission of Biotage. Information in this document is subject to change without notice and does not represent any commitment from Biotage. E&OE. A list of all trademarks owned by Biotage AB is available at www.biotage.com/legal. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks and/or service marks of their respective owners, and are used only for explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.