

Biotage® Liquid Level Sensor



* Liquid Level SensorとSelekt本体は別売りです。

レーダー技術を使用して、ボトルキャップに取り付けたセンサーと液面間の距離を測定し、システムがリアルタイムで容器内にある実際の溶媒量を表示します。
Selektおよび**Selekt Enkel**専用のオプションです。


常時モニター：液量の現在量を常に測定し、溶媒が足りない場合、通知。

安全性：分取中の溶媒枯渇による分取失敗、あるいは廃液タンクから溶媒があふれるリスクを自動停止機能でゼロに。

簡単設定：キャリブレーション済みの専用容器を使えばすぐに使用可能。
ユーザー独自の容器もキャリブレーションを行うことで使用可能。



SensorをGL45広口瓶に取り付けた状態

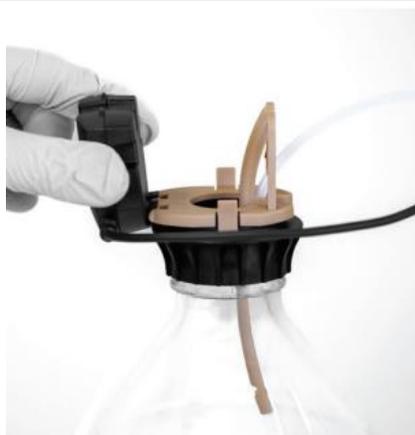


Sensorを開閉し、ロートを使って溶媒継ぎ足し可能



Hubを装置側面に取り付け

- 専用のポリタンク5Lリザーバーと10Lリザーバーならキャリブレーション不要ですすぐにご使用可能。
- 普段ご使用の容器もキャリブレーションを行うことにご使用可能。
- 容器の口はGL45、あるいは日本のガロン瓶で一般的な38-430タイプに対応。
- キャリブレーションデータはUSBメモリーを介してコピー可能。敷地内の他のSelektでもすぐにご使用可能。

Solvent detection

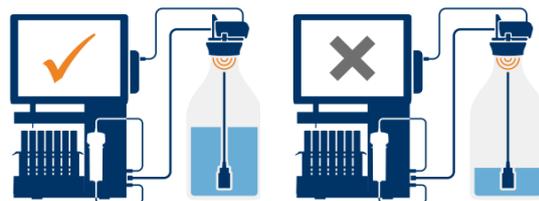

仕様

サイズと重量	Hub 157 x 85 x 32 mm 133.5 g Sensor 63 x 55 x 27 mm 64.2 g Selekt / Selekt Enkel (別売り) に取り付けて一体型使用
電源	24 V
最大消費電力	500 mA
IPコード	IP 54 (センサー)
RFタイプ	トランシーバー
動作周波数範囲	57-64 GHz
レーダーピーク出力電力	18 dBm
認証	本製品は日本の電波法および電気通信事業法に従って認証を得ています。

型番	品名	価格 (税別)
418776	Biotage® Selekt Liquid Level Sensor Kit	280,000
418843	Biotage® Selekt Enkel Liquid Level Sensor Kit	196,000
418523SP	Reservoir 5L, GL45, Qty 5	35,000
418524SP	Reservoir 10L, GL45 Qty 1	7,000
418528SP	GL45 Cap, Qty 5	28,000
418529SP	38-430 Cap, Qty 5	28,000
418571SP	Universal Cap Adapter (38-430), Qty 5	28,000

バイオタージ・ジャパン株式会社

本社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4,6F
TEL 03-5627-3123
西日本：〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28,4F
TEL 06-6397-8180
URL: <http://www.biotage.co.jp>
E-mail: Japan_info@biotage.com

代理店様情報

